

SAM para amoníaco

A-2024: Dos métodos, 4 gamas

Para configurarlo en cero

1. Presione la tecla ON/OFF (encendido y apagado).
2. Pulse la tecla Modo para desplazarse hasta el método de amoníaco elegido.
 - Ir 14 = use Ammonia Vacu-vials® Kit, Catálogo # K-1413, Rango 0 - 3.00 ppm
 - hr 14 = use Ammonia Vacu-vials® Kit, Catálogo # K-1413, Rango 0 - 60.0 ppm
 - Ir 15 = use Ammonia Vacu-vials® Kit, Catálogo # K-1513, Rango 0 - 10.00 ppm
 - hr 15 = use Ammonia Vacu-vials® Kit, Catálogo # K-1513, Rango 0 - 150 ppm
3. Introduzca la ampolla ZERO (que se suministra en el kit Vacu-vials®), comenzando con el extremo plano, en el compartimento de la celda de la muestra (con una leve presión hacia abajo), asegurándose de que esté completamente calzada.
4. Coloque la protección liviana sobre la ampolla ZERO.
5. Presione la tecla Cero/Prueba (Zero/Test). El símbolo del método seleccionado en el paso 2 parpadeará durante aproximadamente 8 segundos y, a continuación, la pantalla mostrará "0.0.0".

Para hacer una medición

1. Siga el procedimiento de prueba apropiado en el kit de prueba de Amoníaco Vacu-vials de su elección.
2. Introduzca la ampolla de cloro resultante Vacu-vial, comenzando con el extremo plano, en el compartimento de la celda de la muestra (con una leve presión hacia abajo), asegurándose de que esté completamente calzada.
3. Coloque la protección liviana sobre la ampolla de prueba.
4. Presione la tecla Cero/Prueba (Zero/Test). El símbolo del método seleccionado anteriormente parpadeará durante aproximadamente 3 segundos y, a continuación, el resultado de la prueba de la muestra aparecerá en la pantalla como ppm (mg/litro).

Consejos de operación

- En el momento del inicio, el fotómetro comenzará automáticamente con el proceso de ajuste a cero. Cada vez que se encienda el fotómetro, deberá volver a ajustarse a cero.
- Para que el fotómetro vuelva a ajustarse a cero, se debe apagar y volver a encender.
- Al arrancar, el fotómetro muestra el último método seleccionado.
- Para cambiar de método, basta con pulsar la tecla mode. No es necesario volver a poner a cero el fotómetro al cambiar de método.
- Se puede tomar una serie de lecturas sin volver a ajustar a cero siempre y cuando el fotómetro permanezca encendido durante la serie.
- Proteja el fotómetro de la humedad extrema, los vapores corrosivos y las áreas polvorientas. Guárdelo en un lugar fresco y seco.
- Cuando no esté usando el fotómetro, retire las baterías.
- Presione la tecla ! para encender o apagar la luz de retroiluminación de la pantalla.
- Cuando mueva el fotómetro de un extremo de temperatura a otro, espere al menos 10 minutos antes de usarlo para permitirle lograr un equilibrio de temperatura.
- La contaminación de la óptica en la cámara de muestra generará mediciones incorrectas. Las ventanas de la cámara de muestra se deben revisar a intervalos regulares y se deben limpiar según sea necesario. Use un paño húmedo suave o un hisopo de algodón para limpiar.
- Si el adaptador de la celda de muestra se hubiera quitado, deberá sustituirse con la orientación indicada, alineando el triángulo del adaptador con el triángulo del fotómetro.

Pantallas y resolución de problemas

E01: absorción de luz demasiado grande (óptica sucia)

E020 o E021: llega demasiada luz al detector


E022 o ícono de pilas: se deben cambiar las pilas

E027, E028 o E029: instrumento ajustado a cero de manera incorrecta, adaptador mal alineado, vial no completamente sentado, óptica sucia o fuente de luz con falla

Hi o E03: rango de medición excedido o turbidez excesiva

Lo: el resultado de prueba tiene un valor negativo (menos de 0 ppm) o vial no completamente sentado

Instalación de pilas

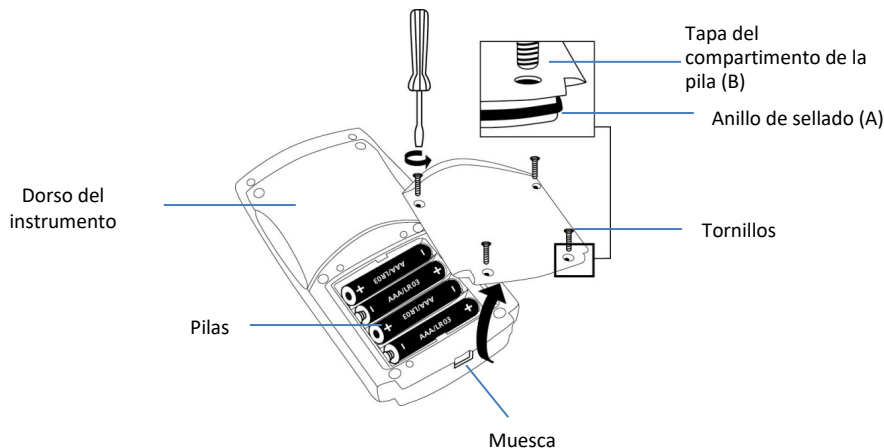

Para asegurarse de que el instrumento sea impermeable:

- el anillo de sellado (A) debe estar en posición
- la tapa del compartimento de las pilas (B) debe estar fijada con los cuatro tornillos

Especificaciones

Apagado automático: luego de 15 minutos de inactividad

Óptica: LED de 430 y 610 nm/filtros de interferencia y fotosensor en cámara de muestra transparente

Temp. de operación: 5 a 40 °C (41 a 104 °F)

Pilas: 4 pilas AAA (aprox. 5.000 pruebas o 17 horas)

Impermeabilidad: en flotación, IP68 (1 hora a 0,1 metros)

Precisión de la longitud de onda: ± 1 nm

Precisión fotométrica*: 3% a escala completa (T = 20 - 25 °C / 68 - 77 °F)

Resolución fotométrica: 0,01 A

Condiciones del ambiente: Temperatura 5 - 40 °C / 41 - 104 °F

Humedad rel. 30 - 90 % (sin condensación)

CE: Certificado de declaración de conformidad de la CE disponible según se solicite.

Selección del menú

Configuración de la fecha y la hora

Al iniciarse por primera vez, el SAM mostrará "Set", "dAtE", y "YYYY", y luego un número de 4 dígitos. Continúe en el paso 4 del procedimiento siguiente para establecer la fecha y la hora, o apague el instrumento y vuélvalo a encender para omitir este proceso. Siempre que haya que restablecer la hora y/o la fecha, siga los pasos 1 al 6 del procedimiento siguiente.

1. Mantenga presionada la tecla Mode. Encienda el instrumento presionando y soltando la tecla ON/OFF. Cuando aparezcan los tres puntos decimales en la pantalla, suelte la tecla Mode. La pantalla mostrará "di 5".
2. Presione y suelte la tecla ! hasta que en la pantalla aparezcan flechas en las esquinas izquierdas superior e inferior, señalando «Time» y «Date».
3. Presione la tecla Mode. En la pantalla aparecerán brevemente "Set" y "dAtE".
4. Los ajustes de fecha y hora se muestran en el siguiente orden: Año ("YYYY"), mes ("MM"), día ("dd"), hora ("hh"), minutos ("mm"). Incremente el valor mostrado en cada ajuste presionando la tecla Mode o disminuya el valor presionando la tecla Zero/Test hasta que se muestre el valor deseado.
5. Presione la tecla ! para guardar el valor mostrado y continuar con el próximo ajuste.
6. Después de ajustar los minutos, presione la tecla ! La pantalla parpadeará mostrando "iS" "SET" y luego volverá al modo de medición.

Recuperación de datos almacenados

El fotómetro SAM guarda automáticamente los últimos 15 conjuntos de datos. Para recuperar datos guardados:

1. Mantenga presionada la tecla Mode. Encienda el instrumento presionando y soltando la tecla ON/OFF. Cuando aparezcan los tres puntos decimales en la pantalla, suelte la tecla Mode. La pantalla mostrará "di 5".

Nota: Si el instrumento ya está encendido, mantenga presionada la tecla ! durante al menos 4 segundos y suéltela para acceder a los datos almacenados.

2. Presione la tecla Mode. El fotómetro mostrará los conjuntos de datos almacenados en el siguiente formato:
 - a. Número de ejemplo: nXX (p. ej. n15, n14, ... n1)
 - b. Año: XXXX (p. ej. 2017)
 - c. Fecha: mm.dd (p. ej. 03.15)
 - d. Hora: hh.mm (p. ej. 12:05)
 - e. Método
 - f. Resultado
3. Presione la tecla Zero/Test para repetir el conjunto de datos actual.
4. Presione la tecla Mode para continuar con el siguiente conjunto de datos.
5. Presione la tecla ! para volver al modo de medición.



www.chemetrics.com
4295 Catlett Road, Midland, VA 22728 EE. UU.
Correo electrónico: orders@chemetrics.com
Mayo de 2023, rev. 2